



# de

**REF** Artikelnummer


**QTY** Menge


 Verwendbar bis JJJJ-MM-TT


 Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)


**LOT** Charge


**STERILEEO** Sterilisiert mit Ethylenoxid


 Nicht wiederverwenden


 Gebrauchsanweisung beachten

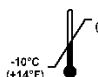
 Temperaturbegrenzung  
-10°C (+14°F) bis +50°C (+122°F)

 Nicht erneut sterilisieren

 Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden

 Vor Nässe schützen

 Vor Sonnenlicht schützen

 Hersteller

**Rx ONLY**

Achtung: Nach US-amerikanischem Bundesrecht darf dieses Gerät nur an einen Arzt verkauft oder von einem Arzt bestellt werden.

Weitere Informationen zu den verwendeten Symbolen finden Sie auf unserer Homepage: [www.moeller-medical.com/glossary-symbols](http://www.moeller-medical.com/glossary-symbols)

## Schlauchset für Liposat® basic (REF. 00002492)

**Achtung:** Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist. Sichere Verwendung nur in Verbindung mit den folgenden Produkten:

Pumpe		Zubehör	
Bezeichnung	REF	Bezeichnung	REF
<i>Liposat® basic</i>	00002498	Hahnenbank	00002278 / 00002279
		Manueller Handgriff	00002254
		Sterican Kanülen	00002535
		Kanülen für <i>Vibrasat®</i>	Siehe Broschüre
		TLA Luer-Lock Adapter	00004027

Tabelle 1

Tabelle 2

**Zweckbestimmung:** Das Schlauchset *Liposat® basic* kommt sowohl für medizinische Indikationen, die unter anderem mit einer Veränderung des Fettgewebes einhergehen als auch im Bereich der ästhetischen Körperformung zum Einsatz. Das Schlauchset *Liposat® basic* wird dafür verwendet Tumescenz Lokalanästhesielösungen, andere wässrige Infusionslösungen sowie körpereigenes, subkutanes Gewebe und dessen Bestandteile in den Körper zu fördern. Das Schlauchset wird Ethylenoxid sterilisiert als Einmalprodukt in Verkehr gebracht und darf nur in Verbindung mit der Schlauchpumpe *Liposat® basic* verwendet werden.

**Einmalverwendung:** Die Wiederverwendung von Einmalartikeln birgt das potenzielle Risiko einer Infektion für Patient oder Bediener. Kontaminierte Artikel können zur Schädigung, Erkrankung oder zum Tod des Patienten führen. Reinigung, Desinfektion und Sterilisation können entscheidende Materialeigenschaften und Produktparameter derart beeinträchtigen, dass dies zum Versagen der Artikel führt.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Vor dem Einsatz sollten Anwender mit der *Liposat® basic* Pumpe vertraut sein. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung der *Liposat® basic* Pumpe.

### Kontraindikationen

Siehe Gebrauchsanweisung der *Liposat® basic* Pumpe

### Kurzanleitung


Diese Anleitung ist nur gemeinsam mit der Gebrauchsanweisungen der *Liposat® basic* Pumpe und dem entsprechenden Zubehör gültig.


- 1) Öffnen Sie die Frontscheibe der Pumpe.
- 2) Stecken Sie das Schlauchadaptionstück der Saugseite des Pumpschlauches in die Pumpenaufnahme. Durch eine Links-Drehung des Pumpenrotors mit der Hand, wird der Pumpschlauch über die Pumpschlauchführungen eingefädelt.
- 3) Die Pumpe ist linksdrehend. Die Drehrichtung der Pumpe, ist auch die Förderrichtung der Kochsalzlösung.
- 4) Nehmen Sie das Adaptionstück der Druckseite des Pumpschlauches und arretieren Sie es in die zweite Aufnahme des Pumpenkopfes.
- 5) Stecken Sie den Einstechdorn in den Kochsalzbeutel.
- 6) Verbinden Sie das zweite Endstück des Schlauchsets mit einer der Infiltrationsmöglichkeiten aus Tabelle 2.

Das Schlauchst ist jetzt vollständig montiert.

Beachten Sie, dass der Spikeanschluss auf der rechten Seite und der Anschluss für eine der Infiltrationsmöglichkeiten aus Tabelle 2 auf der linken Seite sind.

### Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung der Liposat® basic Pumpe für die Handhabung des Infiltrations-Schlauchsets.

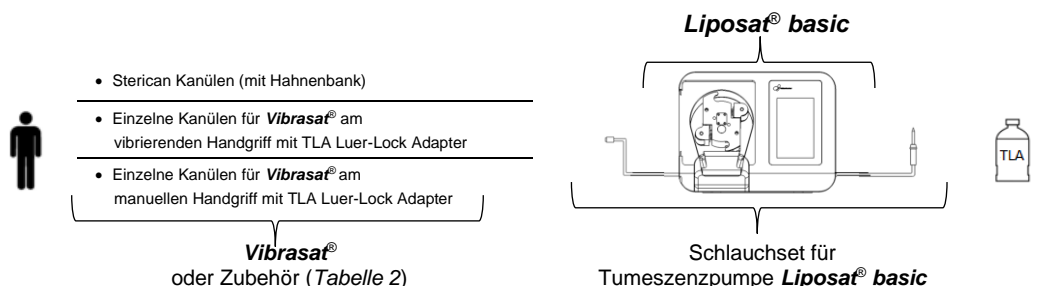

 Möller Medical GmbH  
Wasserkuppenstraße 29-31  
36043 Fulda, Germany

Tel. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 0  
Fax. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 850  
<http://www.moeller-medical.com>  
[info@moeller-medical.com](mailto:info@moeller-medical.com)

CE 0482



30007673 2021-02 A

# en

**REF** Catalog number

**QTY** Quantity

Use by Date  
YYYY-MM-DD

Date of manufacture  
YYYY-MM-DD

**LOT** Batch code

**STERILE EO** Sterilized using ethylene oxide

Do not reuse

Consult instructions for use

Temperature limitation  
-10°C (+14°F) to +50°C (+122°F)

Do not resterilise

Do not use if package is damaged

Keep dry

Keep away from sunlight

Manufacturer

**R ONLY**  
Attention: Under US Federal law this device may be sold only to a physician or ordered by a physician.

Further information on the symbols used can be found on our homepage: [www.moeller-medical.com/glossary-symbols](http://www.moeller-medical.com/glossary-symbols)

## Tubing for tumescent pump Liposat® basic (REF. 00002492)

**Attention:** Do not use the product if the packaging is damaged. Safe use only in combination with the following products:

Pump		Accessories	
Product	REF	Product	REF
<i>Liposat® basic</i>	00002498	Multi-way-tap	00002278 /00002279
		Manual handle	00002254
		Sterican Cannulas	00002535
		Cannulas for <i>Vibrasat®</i>	see brochure
		TLA Luer-Lock Adapter	00004027

Table 1

Table 2

**Intended use:** The *Liposat® basic* tubing set is used both for medical indications, including those accompanied by a change in fatty tissue, and for aesthetic body shaping. The tube set for *Liposat® basic* is used to promote aqueous solutions to produce tumescence local anaesthesia as well as body-owning, subcutaneous tissue, and its components into the body. The tubing set, sterilised with ethylene oxide, is marketed as a disposable product and may only be used in conjunction with *Liposat® basic*.

**Single use:** The reuse of a single-use product presents a potential risk of infection for the patient or operator. Contaminated products can damage health and cause illness or even death of the patient. Cleaning, disinfection, and sterilization can adversely affect essential material properties and product parameters and thus result in product failure.

**Precautions:** Before use, users should be familiar with the *Liposat® basic* pump. Follow the instructions for use of the *Liposat® basic* pump.

**Contraindication**

See the instructions for use of the *Liposat® basic* pump.


**Quick guide**

These instructions are only to be used together with the instructions for use for the *Liposat® basic* pump and the corresponding accessories.

- 1) Open the front cover of the pump.
  - 2) Insert the tube adapter of the suction side of the pump tube into the pump holder. By turning the pump rotor to the left by hand, the pump tube is threaded over the pump tube guides.
  - 3) The direction of rotation of the pump is anticlockwise. The direction of rotation of the pump, is the delivery direction of the saline solution.
  - 4) Insert the spike in the saline bag.
  - 5) Connect the second end piece of the tube with one of the infiltration options of Table 2.
- The tubing set is completely assembled.

**Note that the spike connector is on the right side and the connector for one of the infiltration options of table 2 is on the left side.**

**Follow the instructions for use of the Liposat® basic pump for handling the infiltration tube set.**

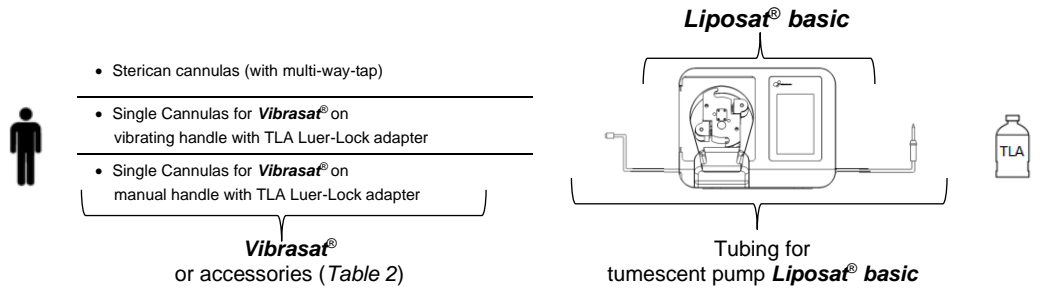

Möller Medical GmbH  
Wasserkuppenstraße 29-31  
36043 Fulda, Germany  
Tel. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 0  
Fax. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 850  
<http://www.moeller-medical.com>  
[info@moeller-medical.com](mailto:info@moeller-medical.com)

CE 0482 MöllerMedical