

BRUGSANVISNING

da

Liposat[®]/Vibrasat[®] Footswitch



VIGTIGT

LÆSES GRUNDIGT INDEN BRUG

SKAL OPBEVARES TIL SENERE REFERENCE

© Möller Medical GmbH

Alle rettigheder forbeholdt.

Ingen del af denne dokumentation må reproducere eller oversættes i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Möller Medical GmbH. Status for de oplysninger, specifikationer og illustrationer, der præsenteres i denne brugsanvisning, er identificeret med versionsnummeret på den sidste side. Möller Medical GmbH forbeholder sig retten til at foretage ændringer af teknologier, funktioner, specifikationer, design og informationer til hver en tid og uden foregående varsel.

Möller Medical GmbH, Wasserkuppenstraße 29-31, 36043 Fulda, Germany

Indholdsfortegnelse

1	Generelle sikkerhedsanvisninger	5
1.1	Forklaring til de anvendte sikkerhedssymboler	5
1.1.1	Symboler i brugsanvisningen	5
1.1.2	Symboler på apparatet.....	5
1.1.3	Yderligere symboler på handelsemballagen.....	6
1.2	Advarsler	6
1.3	Yderligere oplysninger.....	6
2	Produktbeskrivelse.....	7
2.1	Anvendelsesformål.....	7
2.2	Liposat®/Vibrasat® Footswitch.....	7
2.2.1	Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1-pedal)	7
2.2.2	Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3-pedal)	8
2.3	Sæt Liposat®/Vibrasat® Footswitch i.....	8
3	Hjælp i tilfælde af funktionsfejlfører til succes.....	9
4	Bortskaffelse	10
5	Opbevaringsforhold/tekniske egenskaber	11

Generelle sikkerhedsanvisninger

1 Generelle sikkerhedsanvisninger

1.1 Forklaring til de anvendte sikkerhedssymboler

I denne brugsanvisning er vigtige tip fremhævet visuelt. Disse anvisninger er en forudsætning for at kunne udelukke risici for patienter, brugere og tredjeparter samt for at undgå beskadigelser eller funktionsfejl på apparatet.

1.1.1 Symboler i brugsanvisningen



Bemærk



Tip eller hjælp

1.1.2 Symboler på apparatet



Artikelnummer



Produktionslotnummer, batch



Unik identifikation for medicinsk udstyr



Medicinsk udstyr



Produktionsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD)



Producent



Følg brugsanvisningen

IPX7

Beskyttelse mod kraftige vandstråler eller indtrængen af vand i tilfælde af kortvarig oversvømmelse

IPX8

Beskyttelse mod kraftige vandstråler eller indtrængen af vand i tilfælde af varig oversvømmelse



Tilbagetagelse og bortskaffelse sker i henhold til WEEE-direktivet

Generelle sikkerhedsanvisninger

1.1.3 Yderligere symboler på handelsemballagen



Temperaturbegrænsning



Emballageenhed



Tilbagetagelse og bortskaffelse sker i henhold til WEEE-direktivet

RX ONLY

Forsigtig: I henhold til USA's føderale lovgivning må dette produkt kun sælges til en læge eller på bestilling af en læge.

Yderligere information om de anvendte symboler findes på vores hjemmeside:

www.moeller-medical.com/glossary-symbols

1.2 Advarsler



- Ændring af apparaterne er ikke tilladt
- Der må ikke trænge væsker ind i apparatets strømførende dele
- Ved rengøring skal der sørges for, at der ikke løber rengøringsmiddel ind i stikkontakterne
- Træk lysnetkablet ud inden rengøring
- Udskift alle slags tilslutningskabler, allerede når de er blot let beskadiget, og sørg for ikke at rulle hen over kablerne
- Hold kablerne væk fra varmekilder. Derved forhindres isoleringen i at smelte, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød
- Tving ikke stikkene ind i stikkontakterne
- Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du tage fat i stikket og ikke i kablet. Lås om nødvendigt stikket op for at fjerne det
- Udsæt ikke apparaterne for kraftig varme eller åben ild
- Udsæt ikke apparaterne for kraftige stød
- Hvis der opstår kraftig varme, røg eller dampe, skal du straks frakoble apparaterne fra strømforsyningen

1.3 Yderligere oplysninger

Bemærk venligst yderligere oplysninger og bemærkninger i de følgende brugsanvisninger.

Brugsanvisninger	
Liposat® Pro og Liposat® Pro plus	Vibrasat® Pro
Liposat® power	Vibrasat® power

*Tabel 1:
Refererede brugsanvisninger*

Alle brugsanvisninger er tilgængelige på forskellige sprog på vores hjemmeside på:
www.moeller-medical.com/ifu-ga

Produktbeskrivelse

2 Produktbeskrivelse

2.1 Anvendelsesformål

Enhederne fra Vibrasat® og Liposat® serien kan fjernstyres ved hjælp af Liposat®/Vibrasat® Footswitch.

2.2 Liposat®/Vibrasat® Footswitch

Der kan tilsluttes to Liposat®/Vibrasat® Footswitch til apparaterne på samme tid (gælder for Pro-apparater). Begge tilslutningsstikkontakter på bagpanelet er ens, og Liposat®/Vibrasat® Footswitch opfører sig identisk. Tilslutningsstikkontakterne har farvede ringmarkeringer. Hvis de er tilgængelige, fastgøres kablerne ved de passende farvede kabelmarkeringer til Liposat®/Vibrasat® Footswitch for at sikre korrekt positionering.



- Når du sætter stikket i, skal du sørge for, at hakket på stikket vender opad og dermed passer i stikkontakten. En forkert vendt montering fører til fejlfunktioner i apparaterne

Du kan bruge de andre kabelmarkeringer til også at markere Liposat®/Vibrasat® Footswitch fra andre af dine Möller Medical-apparater med farver og dermed bedre kunne skelne dem fra hinanden. Liposat®/Vibrasat® Footswitch er ligeberettiget mht. indstillingsmuligheder for Vibrasat® og Liposat® -apparaterne.

2.2.1 Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1-pedal)



*Figur 1:
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1-pedal)*


Apparaterne kan startes og stoppes ved tryk på knappen.
1-Pedal Liposat®/Vibrasat® Footswitch har følgende bestillingsnumre:

Betegnelse	Bestillingsnr.:
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1-pedal, 2 m kabellængde)	93003545
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1-pedal, 5 m kabellængde)	00003982

*Tabel 2:
Bestillingsnumre Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1-pedal)*

Produktbeskrivelse

2.2.2 Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3-pedal)

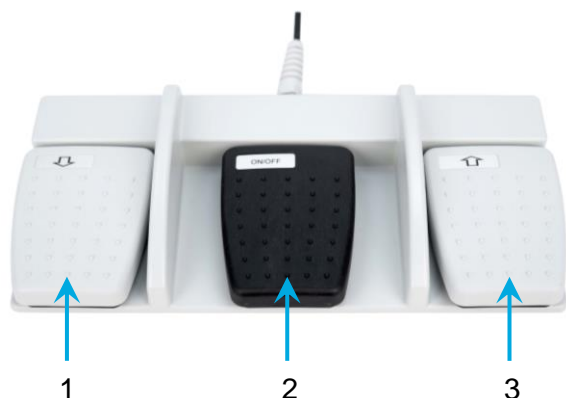

Figur 2:
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3-pedal)

Nr.	Betegnelse
1	Ned-knap
2	Tænd-/Sluk-knap
3	Op-knap

Tabel 3:
Betegnelse

Apparaterne kan startes og stoppes ved tryk på Tænd-/Sluk-knappen. Vibrations- eller transporthastigheden kan indstilles ved hjælp af Op- og Ned-knapperne.

3-Pedal Liposat®/Vibrasat® Footswitch har følgende bestillingsnumre:

Betegnelse	Bestillingsnr.:
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3-pedal, 2 m kabellængde)	93003517
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3-pedal, 5 m kabellængde)	00003981

Tabel 4:
Bestillingsnumre Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3-pedal)

2.3 Sæt Liposat® / Vibrasat® Footswitch i

Stikket til Liposat® / Vibrasat® Footswitch og stikkontakterne har hver en styreskinne. Styreskinne på begge skal gå i indgreb med hinanden, ellers kan de blive beskadiget ved tilslutning.

1. Justér styreskinne på stikkontakten og stikket ind efter hinanden
2. Skub stikket ind i stikkontakten på en sådan måde, at styreskinne går i indgreb med hinanden, herunder må der ikke kunne mærkes modstand
3. Lige så snart, en større modstand kan mærkes, skal du stoppe og kontrollere styreskinne position
4. Skru låsemøtrikken fast med hånden
5. En lille bevægelse af stikket kan gøre det lettere at skrue fast

Hjælp i tilfælde af funktionsfejl fører til succes

3 Hjælp i tilfælde af funktionsfejl fører til succes

Fodkontakt reagerer ikke	Fodkontaktens tilslutningskabel er ikke tilsluttet eller er blevet sat forkert i. Kontrollér stikforbindelsen.
Hvis de angivne foranstaltninger ikke fører til succes, skal du kontakte Möller Medical GmbH's servicecenter.	

Möller Medical GmbH's servicecenter:

Möller Medical GmbH

Wasserkuppenstrasse 29-31
36043 Fulda, Tyskland

Tlf. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 0
Faks +49 (0) 661 / 94 19 5 – 850
www.moeller-medical.com
info@moeller-medical.com



Service

Tlf.: +49 (0) 661 94195 - 108
Fax: +49 (0) 661 94195 - 850
E-mail: service@moeller-medical.com

4 Bortskaffelse



Dette apparat indeholder materiale, der skal bortskaffes på en miljørigtig måde. Det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE2) gælder for dette apparat. Dette apparat er derfor mærket på typeskiltet med et symbol der viser en overstreget skraldespand.

Send apparater, der ikke længere bruges, tilbage til Möller Medical GmbH. Dette sikrer, at bortskaffelse sker i overensstemmelse med den nationale implementering af WEEE-direktivet.

Opbevaringsforhold/tekniske egenskaber

5 Opbevaringsforhold/tekniske egenskaber

Artikelnummer

Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1-pedal, 2 m kabellængde)	Bestillingsnr. 93003545
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1-pedal, 5 m kabellængde)	Bestillingsnr. 00003982
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3-pedal, 2 m kabellængde)	Bestillingsnr. 93003517
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3-pedal, 5 m kabellængde)	Bestillingsnr. 00003981

Mål

Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1-pedal)	Bredde x højde x dybde: 140 mm x 45 mm x 105 mm	+ (kabellængde) + (2 m / 5 m)
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3-pedal)	Bredde x højde x dybde: 290 mm x 55 mm x 134 mm	+ (kabellængde) + (2 m / 5 m)

Vægt

Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1-pedal, 2 m kabellængde)	0,300 kg
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1-pedal, 5 m kabellængde)	0,400 kg
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3-pedal, 2 m kabellængde)	1.200 kg
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3-pedal, 5 m kabellængde)	1.300 kg

Transport og opbevaringsinstruktioner

Temperatur	-10 °C til +50 °C
Luffugtighed	< 90 % rel. fugtighed
Emballagens dimensioner Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1-pedal)	Bredde x højde x dybde: 80 mm x 250 mm x 140 mm
Emballagens dimensioner Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3-pedal)	Bredde x højde x dybde: 320 mm x 55 mm x 215 mm

Driftsforhold

Temperatur	+10 °C til +40 °C
Luffugtighed	30 til 75 % rel. fugtighed
Atmosfærisk tryk	70,1 kPa – 101,3 kPa (3000-0 m NN)

Beskyttelsesklasse

Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1-pedal)	IP X7 (baseret på IEC 60601-1)
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3-pedal)	IP X8 (baseret på IEC 60601-1)



Brugsanvisningens
bestillingsnummer
(REF) 93008353



Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstrasse 29-31
36043 Fulda, Tyskland

Tlf. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 0
Faks +49 (0) 661 / 94 19 5 – 850
www.moeller-medical.com
info@moeller-medical.com

