

KULLANIM KILAVUZU

tr

Liposat[®] / Vibrasat[®]
Footswitch



ÖNEMLİ

KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN

İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

© Möller Medical GmbH
Her hakkı saklıdır.

Möller Medical GmbH'nin önceden yazılı onayı olmadan, bu belgenin hiçbir bölümü herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve tercüme edilemez. Bu kullanım kılavuzunda sunulan bilgilerin, teknik özelliklerin ve resimlerin durumu, son sayfadaki sürüm numarası ile işaretlenmiştir. Teknolojiler, işlevler, teknik özellikler, tasarım ve bilgilerle ilgili olarak Möller Medical GmbH istediği zaman ve önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Möller Medical GmbH, Wasserkuppenstraße 29-31, 36043 Fulda, Almanya

İçindekiler

1 Genel Güvenlik Talimatları	5
1.1 Kullanılan Güvenlik Sembollerinin Açıklaması	5
1.1.1 Kullanım Kılavuzundaki Semboller	5
1.1.2 Cihaz Üzerindeki Semboller	5
1.1.3 Ticari Ambalaj Üzerindeki Ek Semboller	6
1.2 İkaz Bilgileri	6
1.3 Daha fazla bilgi	6
2 Ürün Tanımı	7
2.1 Kullanım Amacı	7
2.2 Liposat® / Vibrasat® Footswitch	7
2.2.1 Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 pedallı)	7
2.2.2 Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 pedallı)	8
2.3 Liposat® / Vibrasat® Footswitch cihazının takılması	8
3 Arıza Durumunda Yardım	9
4 Bertaraf İşlemi	10
5 Saklama koşulları/Teknik özellikler	11

1 Genel Güvenlik Talimatları

1.1 Kullanılan Güvenlik Sembollerinin Açıklaması

Bu kullanım kılavuzunda önemli uyarılar görsel olarak işaretlenmiştir. Bu uyarılar; hasta, kullanıcı ve üçüncü kişilere yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılması ve cihazın hasar görmesinin veya arızalanmasının önlenmesi için ön koşuldur.

1.1.1 Kullanım Kılavuzundaki Semboller



Dikkat



Uyarı veya Yardım

1.1.2 Cihaz Üzerindeki Semboller



Ürün numarası



Üretim lot numarası, Parti



Tıbbi cihazın benzersiz tanımlayıcısı



Tıbbi cihaz



Üretim tarihi (YYYY.AA.GG)



Üretici



Kullanım kılavuzuna uyun

IPX7

Kuvvetli su püskürmesi veya kısa süreli su baskını durumlarında su girişine karşı koruma


IPX8

Kuvvetli su püskürmesi veya sürekli su baskını durumlarında su girişine karşı koruma



İade alma ve bertaraf etme işlemleri WEEE direktifine göre gerçekleştirilir

1.1.3 Ticari Ambalaj Üzerindeki Ek Semboller

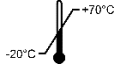

Sıcaklık sınırlaması



Ambalaj birimi



İade alma ve bertaraf etme işlemleri WEEE direktifine göre gerçekleştirilir

Rx ONLY

Dikkat: ABD Federal Hukuku'na göre, bu ürünün satışı yalnızca bir doktora veya bir doktorun sipariş etmesi üzerine gerçekleştirilebilir.

Kullanılan semboller hakkında daha fazla bilgiyi internet sayfamızda bulabilirsiniz:
www.moeller-medical.com/glossary-symbols

1.2 İkaz Bilgileri



- Cihazlarda değişiklik yapılması yasaktır
- Cihazın gerilim taşıyan kısımlarına hiçbir sıvının girmesine izin verilmemelidir
- Cihazı temizlerken prizlere temizlik maddesi girmediğinden emin olun
- Cihazı temizlemeden önce elektrik kablosunu çıkarın
- Bütün bağlantı kablolarını hafif hasar görmüş olsalar bile değiştirin ve kabloların üzerinden geçmemeye dikkat edin
- Kabloları ısı kaynaklarından uzak tutun. Böylece yalıtımın eriyerek yangına veya elektrik çarpmasına yol açmasını önlemiş olursunuz
- Fişleri prizlere zorla sokmayın
- Fişleri çıkarırken kablodan çekmeyin. Gerekli olması halinde, fişleri çıkarmak için kilitleme mekanizmasını çözün
- Cihazları yoğun ısıya veya ateşe maruz bırakmayın
- Cihazları sert darbelere maruz bırakmayın
- Isı, duman veya alev görürseniz, cihazın elektrik bağlantısını derhal kesin

1.3 Daha fazla bilgi

Aşağıdaki kullanım kılavuzunda bulunan bilgi ve uyarılara uyun.

Kullanım Kılavuzu	
Liposat® Pro ve Liposat® Pro plus	Vibrasat® Pro
Liposat® power	Vibrasat® power

Tablo 1:
Referans verilen kullanım kılavuzu

Farklı dillerdeki diğer kullanım kılavuzlarına aşağıda linki bulunan ana sayfamızdan ulaşabilirsiniz:

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Ürün Tanımı

2 Ürün Tanımı

2.1 Kullanım Amacı

Liposat® / Vibrasat® Footswitch yardımı ile Vibrasat® ve Liposat® serisindeki cihazlar uzaktan kullanılabilir.

2.2 Liposat® / Vibrasat® Footswitch

Ünitelere aynı anda iki Liposat® / Vibrasat® Footswitch bağlanabilir (Pro cihazlar için geçerlidir). Arka taraftaki her iki priz bağlantısı da eşittir ve Liposat® / Vibrasat® Footswitch cihazları birbiriyle aynı şekilde çalışır. Priz bağlantılarında renkli halka işaretleri bulunur. Varsa, Liposat® / Vibrasat® Footswitch kablolarına doğru konumlandırmanın güvenli bir şekilde tespiti için uygun renkli kablo işaretlemelerini takın.



- Fişi takarken fiş üzerindeki çentiğin yukarı baktığından ve böylece fişin prize oturduğundan emin olun. Yanlış montaj cihazlarda fonksiyon hatalarına neden olabilir

Ek kablo işaretlerini, diğer Möller Medical cihazlarınızın Liposat® / Vibrasat® Footswitch cihazını farklı renklerle işaretleyerek daha iyi ayırt etmek için kullanabilirsiniz. Liposat® / Vibrasat® Footswitch cihazının ayar seçenekleri, Vibrasat® ve Liposat® cihazının ayar seçenekleri ile aynıdır.

2.2.1 Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 pedallı)



Resim 1:
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 pedallı)

Tuşlarına basarak cihazları başlatabilir veya durdurabilirsiniz.

1 pedallı Liposat® / Vibrasat® Footswitch aşağıdaki sipariş numarasına sahiptir:

Açıklama	Sipariş No.
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 pedallı, 2 m kablo uzunluğu)	93003545
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 pedallı, 5 m kablo uzunluğu)	00003982

Tablo 2:

Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 pedallı) Sipariş Numaraları

2.2.2 Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 pedallı)



Resim 2:
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 pedallı)

No.	Açıklama
1	Aşağı tuşu
2	Açma/Kapatma tuşu
3	Yukarı tuşu

Tablo 3:
Açıklama

On/Off tuşlarına basarak cihazları başlatabilir veya durdurabilirsiniz. Artırma ve azaltma tuşları ile titreşim veya akış hızı ayarlanabilir.

3 pedallı Liposat® / Vibrasat® Footswitch aşağıdaki sipariş numarasına sahiptir:

Açıklama	Sipariş No.
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 pedallı, 2 m kablo uzunluğu)	93003517
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 pedallı, 5 m kablo uzunluğu)	00003981

Tablo 4:
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 pedallı) Sipariş Numaraları

2.3 Liposat® / Vibrasat® Footswitch cihazının takılması

Liposat® / Vibrasat® Footswitch fişleri ve prizleri tek bir kılavuz rayını kullanır. Her ikisinin de kılavuz rayı iç içe geçmelidir, aksi takdirde bağlantı sırasında hasara uğrayabilirler.

1. Fiş ve prizlerin kılavuz rayını birbirine hizalayın
2. Fişi, kılavuz raylar birbirine geçecek ve fark edilir bir direnç olmayacak şekilde prize itin
3. Daha kuvvetli bir direnç hissedildiğinde durun ve kılavuz raylarının hizalamalarını kontrol edin
4. Emniyet somununu elinizle sıkın
5. Fişi hafifçe hareket ettirmek sıkmayı kolaylaştırabilir


Arıza Durumunda Yardım**3 Arıza Durumunda Yardım**

Ayak pedalı yanıt vermiyor	Ayak pedalının bağlantı kablosu bağlanmamış veya yanlış takılmış. Fiş bağlantısını kontrol edin.
Belirtilen önlemin başarısız olduğu durumda Möller Medical GmbH'nin hizmet merkezine başvurun.	

Möller Medical GmbH'nin Servis Merkezi:**Möller Medical GmbH**

Wasserkuppenstrasse 29-31
36043 Fulda, Almanya

Tel. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 0
Faks +49 (0) 661 / 94 19 5 – 850
www.moeller-medical.com
info@moeller-medical.com

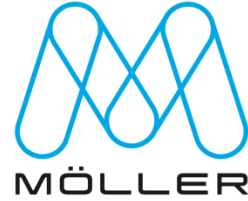**Servis**

Tel: +49 (0) 661 94195 - 108
Faks: +49 (0) 661 94195 - 850
E-posta: service@moeller-medical.com

4 Bertaraf İşlemi



Bu cihaz, çevrenin korunması amacıyla bertaraf edilmesi gereken malzemeler içermektedir. Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlara (WEEE2) ilişkin 2012/19/AB sayılı Avrupa Direktifi bu cihazla ilgilidir. Bu nedenle bu cihaz tip etiketinde üzeri çizilmiş çöp kutusu sembolü ile işaretlenmiştir.

Artık kullanılmayan cihazları Möller Medical GmbH'ye iade edin. Bu, bertaraf işleminin WEEE Direktifinin ulusal versiyonlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

Saklama koşulları/Teknik özellikler**5 Saklama koşulları/Teknik özellikler****Ürün Numarası**

Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 Pedallı, 2 m kablo uzunluğu)	Sipariş No. 93003545
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 Pedallı, 5 m kablo uzunluğu)	Sipariş No. 00003982
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 Pedallı, 2 m kablo uzunluğu)	Sipariş No. 93003517
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 Pedallı, 5 m kablo uzunluğu)	Sipariş No. 00003981

Ölçüler

Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 Pedallı)	Genişlik x Yükseklik x Derinlik: 140 mm x 45 mm x 105 mm	+ (Kablo uzunluğu) + (2 m / 5 m)
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 Pedallı)	Genişlik x Yükseklik x Derinlik: 290 mm x 55 mm x 134 mm	+ (Kablo uzunluğu) + (2 m / 5 m)

Ağırlık

Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 Pedallı, 2 m kablo uzunluğu)	0,300 kg
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 Pedallı, 5 m kablo uzunluğu)	0,400 kg
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 Pedallı, 2 m kablo uzunluğu)	1,200 kg
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 Pedallı, 5 m kablo uzunluğu)	1,300 kg

Taşıma ve Depolama Bilgileri

Sıcaklık	-10 °C ila +50 °C arası
Hava nemi	< %90 bağıl nem
Ambalaj boyutu Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 pedallı)	Genişlik x Yükseklik x Derinlik: 80 mm x 250 mm x 140 mm
Ambalaj boyutu Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 pedallı)	Genişlik x Yükseklik x Derinlik: 320 mm x 55 mm x 215 mm

Çalışma Koşulları

Sıcaklık	+10 °C ila +40 °C arası
Hava nemi	30 ila %75 bağıl nem
Atmosfer basıncı	70,1 kPa – 101,3 kPa (3000-0 m NN)

Koruma türü

Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 pedallı)	IP X7 (IEC 60601-1 uyarınca)
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 pedallı)	IP X8 (IEC 60601-1 uyarınca)



Kullanım Kılavuzu
Sipariş Numarası
(REF) 93008373



Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstrasse 29-31
36043 Fulda, Almanya

Tel. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 0
Faks +49 (0) 661 / 94 19 5 – 850
www.moeller-medical.com
info@moeller-medical.com

