

GEBRUIKERSHANDLEIDING 

Liposat[®]/Vibrasat[®] Footswitch



BELANGRIJK

VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG LEZEN

BEWAREN OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN

© Möller Medical GmbH

Alle rechten voorbehouden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Möller Medical GmbH mag geen enkel deel van deze documentatie in eender welke vorm of op eender welke wijze worden gereproduceerd of vertaald. De status van de informatie, specificaties en afbeeldingen in deze gebruikershandleiding wordt aangegeven door het versienummer op de laatste pagina. Möller Medical GmbH behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in technologieën, functies, specificaties, vormgeving en informatie.

Möller Medical GmbH, Wasserkuppenstraße 29-31, 36043 Fulda, Germany

Inhoud

1	Algemene veiligheidsinstructies	5
1.1	Toelichting bij de gebruikte veiligheidssymbolen	5
1.1.1	Symbolen in de gebruikershandleiding.....	5
1.1.2	Symbolen op het apparaat	5
1.1.3	Aanvullende symbolen op de commerciële verpakking	6
1.2	Waarschuwingen.....	6
1.3	Meer informatie	6
2	Productbeschrijving	7
2.1	Beoogd doel	7
2.2	Liposat®/Vibrasat® Footswitch	7
2.2.1	Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal)	7
2.2.2	Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen)	8
2.3	Liposat® / Vibrasat® Footswitch insteken	8
3	Hulp bij storing	9
4	Verwijdering van het afval	10
5	Opslagomstandigheden/technische kenmerken	11

Algemene veiligheidsinstructies

1 Algemene veiligheidsinstructies

1.1 Toelichting bij de gebruikte veiligheidssymbolen

In deze gebruikershandleiding worden belangrijke instructies aangeduid met symbolen. Deze instructies vormen een voorwaarde om gevaren voor patiënten, gebruikers of derden uit te sluiten en schade aan of storing van het apparaat te voorkomen.

1.1.1 Symbolen in de gebruikershandleiding



Let op



Aanwijzing of hulp

1.1.2 Symbolen op het apparaat



Artikelnummer



Productiebatchnummer, batch



Unieke identificatiecode van een medisch hulpmiddel



Medische hulpmiddelen



Productiedatum (JJJJ-MM-DD)



Fabrikant



De gebruikershandleiding in acht nemen

IPX7

Bescherming tegen sterke waterstralen of tegen het binnendringen van water bij een korte overstroming

IPX8


Bescherming tegen sterke waterstralen of tegen het binnendringen van water bij een permanente overstroming



Terugname en verwijdering vinden plaats overeenkomstig de WEEE-richtlijn

Algemene veiligheidsinstructies

1.1.3 Aanvullende symbolen op de commerciële verpakking

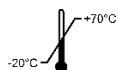

Temperatuurbegrenzing



Verpakkingseenheid



Terugname en verwijdering vinden plaats overeenkomstig de WEEE-richtlijn

Rx ONLY

Voorzichtig: Volgens de US-Amerikaanse federale wetgeving mag dit product alleen worden verkocht aan een arts of op voorschrift van een arts.

Meer informatie over de gebruikte symbolen vindt u op onze homepage:

www.moeller-medical.com/glossary-symbols

1.2 Waarschuwingen



- Wijziging van de apparaten is niet toegestaan
- Er mogen geen vloeistoffen binnendringen in de onder spanning staande delen van het apparaat
- Let er bij de reiniging op dat er geen reinigingsmiddel in de stekkerdozen komt
- Koppel het netsnoer los voorafgaand aan de reiniging
- Vervang alle aansluitkabels reeds als deze slechts licht beschadigd zijn, en let erop dat u niet over de kabels rijdt
- Houd de kabels uit de buurt van warmtebronnen. Dit voorkomt dat de isolatie smelt, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok
- Forceer de stekkers niet in de stekkerdozen
- Trek niet aan de kabel wanneer u de stekkers uittrekt. Maak zo nodig de vergrendeling van de stekkers los om deze uit te trekken
- Stel de apparaten niet bloot aan intense hitte of vuur
- Stel de apparaten niet bloot aan harde schokken
- Als er hitte, damp of rook optreedt, moeten de apparaten onmiddellijk van het stroomnet worden gescheiden

1.3 Meer informatie

Neem de verdere informatie en aanwijzingen in de volgende gebruikershandleidingen in acht.

Gebruikershandleiding	
Liposat® Pro en Liposat® Pro plus	Vibrasat® Pro
Liposat® power	Vibrasat® power

Tabel 1:

Gebruikershandleidingen waarnaar wordt verwezen

Alle gebruikershandleidingen zijn in verschillende talen beschikbaar op onze homepage:

www.moeller-medical.com/ifu-ga

Productbeschrijving

2 Productbeschrijving

2.1 Beoogd doel

Met behulp van de Liposat®/Vibrasat® Footswitch kunnen de apparaten uit de Vibrasat® en Liposat® series op afstand worden bediend.

2.2 Liposat®/Vibrasat® Footswitch

Er kunnen twee Liposat®/Vibrasat® Footswitch tegelijk op de apparaten worden aangesloten (van toepassing op Pro-apparaten). Beide aansluitdozen op het achterpaneel zijn gelijk en de Liposat®/Vibrasat® Footswitch gedragen zich identiek. De aansluitdozen hebben gekleurde ringmarkeringen. Bevestig, indien beschikbaar, de bijpassende gekleurde kabelmarkeringen aan de kabels van de Liposat®/Vibrasat® Footswitch voor een betrouwbare identificatie van de juiste positionering.



- Let er bij het insteken van de voetschakelaar op dat de inkeping op de stekker naar boven wijst en dus in de stekkerdoos past. Een verdraaide montage leidt tot foutieve functies van de apparaten

U kunt de extra kabelmarkeringen gebruiken om de Liposat®/Vibrasat® Footswitch van uw andere Möller Medical apparaten van een kleurcode te voorzien en ze zo beter te onderscheiden. De Liposat®/Vibrasat® Footswitch heeft dezelfde instelmogelijkheden als de Vibrasat® en Liposat® apparaten.

2.2.1 Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal)



Afbeelding 1:
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal)


De apparaten kunnen worden gestart en gestopt door op de knop te drukken. De Liposat®/Vibrasat® Footswitch met 1 pedaal hebben de volgende bestelnummers:

Omschrijving	Bestelnr.
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal, 2 m kabellengte)	93003545
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal, 5 m kabellengte)	00003982

Tabel 2:
Bestelnummers Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal)

Productbeschrijving

2.2.2 Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen)

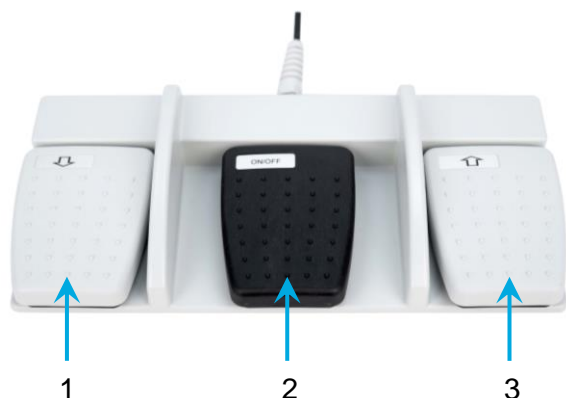

Afbeelding 2:
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen)

Nr.	Omschrijving
1	Omlaag-knop
2	Aan/uit-knop
3	Omhoog-knop

Tabel 3:
Omschrijving

De apparaten kunnen worden gestart en gestopt door op de aan/uit-knop te drukken. Met de knoppen omhoog en omlaag kan de trillings- of de transportsnelheid worden aangepast. De Liposat®/Vibrasat® Footswitch met 3 pedalen hebben de volgende bestelnummers:

Omschrijving	Bestelnr.
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen, 2 m kabellengte)	93003517
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen, 5 m kabellengte)	00003981

Tabel 4:
Bestelnummers Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen)

2.3 Liposat® / Vibrasat® Footswitch insteken

De stekker van de Liposat®/Vibrasat® Footswitch en de stekkerdozen hebben elk een geleiderail. De geleiderails van beide moeten in elkaar grijpen, anders kunnen ze beschadigd raken tijdens het aansluiten.

1. Lijn de geleiderail van de stekkerdoos en de stekker met elkaar uit
2. Duw de stekker zo in de doos dat de geleiderails in elkaar grijpen; er mag geen weerstand voelbaar zijn
3. Zodra u meer weerstand voelt, stopt u en controleert u de uitlijning van de geleiderails
4. Draai de borgmoer met de hand vast
5. Als u de stekker voorzichtig beweegt, kunt u de schroef gemakkelijker vastdraaien

Hulp bij storing

3 Hulp bij storing

Voetschakelaar reageert niet	De aansluitkabel van de voetschakelaar is niet aangesloten of verkeerd aangesloten. Controleer de stekerverbinding.
Als de aangegeven maatregel geen resultaat oplevert, neem dan contact op met het servicepunt van Möller Medical GmbH.	

Servicepunt van Möller Medical GmbH:

Möller Medical GmbH

Wasserkuppenstrasse 29-31
36043 Fulda, Germany

Tel. +49 (0) 661/94 19 5 - 0
Fax +49 (0) 661/94 19 5 - 850
www.moeller-medical.com
info@moeller-medical.com



Service

Tel: +49 (0) 661 94195 - 108
Fax: +49 (0) 661 94195 - 850
E-mail: service@moeller-medical.com

4 Verwijdering van het afval



Dit apparaat bevat materiaal dat op milieuvriendelijke wijze moet worden afgevoerd. De Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE2) is van toepassing op dit apparaat. Daarom staat het symbool van een doorgekruiste afvalbak op het typeplaatje van dit apparaat.

Stuur apparaten die niet meer worden gebruikt terug naar Möller Medical GmbH. Dit garandeert dat de verwijdering plaatsvindt in overeenstemming met de nationale versies van de WEEE-richtlijn.

Opslagomstandigheden/technische kenmerken

5 Opslagomstandigheden/technische kenmerken

Artikelnummer

Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal, 2 m kabellengte)	Bestelnr. 93003545
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal, 5 m kabellengte)	Bestelnr. 00003982
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen, 2 m kabellengte)	Bestelnr. 93003517
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen, 5 m kabellengte)	Bestelnr. 00003981

Afmeting

Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal)	Breedte x hoogte x diepte: 140 mm x 45 mm x 105 mm	+ (kabellengte) + (2 m/5 m)
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen)	Breedte x hoogte x diepte: 290 mm x 55 mm x 134 mm	+ (kabellengte) + (2 m/5 m)

Gewicht

Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal, 2 m kabellengte)	0,300 kg
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal, 5 m kabellengte)	0,400 kg
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen, 2 m kabellengte)	1,200 kg
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen, 5 m kabellengte)	1,300 kg

Transport- en opslaginstructies

Temperatuur	-10 °C tot +50 °C
Luchtvochtigheid	< 90% rel. vochtigheid
Verpakkingsafmeting Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal)	Breedte x hoogte x diepte: 80 mm x 250 mm x 140 mm
Verpakkingsafmeting Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen)	Breedte x hoogte x diepte: 320 mm x 55 mm x 215 mm

Bedrijfsomstandigheden

Temperatuur	+10 °C tot +40 °C
Luchtvochtigheid	30 tot 75% rel. vochtigheid
Atmosferische druk	70,1 kPa - 101,3 kPa (3000-0 m NN)

Beschermingsklasse

Liposat®/Vibrasat® Footswitch (1 pedaal)	IP X7 (volgens IEC 60601-1)
Liposat®/Vibrasat® Footswitch (3 pedalen)	IP X8 (volgens IEC 60601-1)



Bestelnummer van de
gebruikershandleiding
(REF) 93008365



Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstrasse 29-31
36043 Fulda, Germany

Tel. +49 (0) 661/94 19 5 - 0
Fax +49 (0) 661/94 19 5 - 850
www.moeller-medical.com
info@moeller-medical.com

