

de

LiquoGuard®7 Multi-Hub

REF


Artikelnummer

REF

00003817



Gesamtlänge

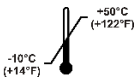LOTFertigungslosnummer,
ChargeGebrauchsanweisung
beachten

Temperaturbegrenzung



Vor Nässe schützen

Vor Sonnenlicht
schützen

Hersteller

Rücknahme und
Entsorgung erfolgen
nach der WEEE-
Richtlinie

Anwendungsteil CF



Achtung

Nicht zur Verwendung
im MRTHerstellungsdatum
(JJJ-MM-TT)Luftfeuchte,
Begrenzung

Wiederverwendbar

Blutdruck,
invasiv**Rx ONLY**

Vorsicht: Gemäß US-
Amerikanischem
Bundesrecht darf
dieses Produkt nur an
einen Arzt oder auf
Bestellung eines Arztes
verkauft werden.

Weitere Informationen zu den verwendeten
Symbolen finden Sie auf unserer Homepage:
www.moeller-medical.com/glossary-symbols


Anschluss



REF 00003500



REF 93006492

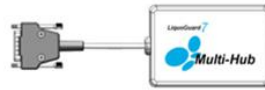

REF 00003817



REF 00003174

Kompatibel mit:
TruWave
Einwegdruckwandler
(Edwards Lifesciences)
e.g. T100209A



- **Sicherheitstechnisch unbedenklich verwendungsfähig nur mit Liquor Drainage Pumpe LiquoGuard®7 REF 00003500**
- **Es ist wichtig darauf zu achten, dass sich der Blutdrucksensor (MAP) und der Liquordrucksensor auf derselben Höhe befinden (siehe Gebrauchsanweisung Liquor Drainage Pumpe LiquoGuard®7 REF 00003500 Kapitel "Positionierung des MAP Sensors")**
- **Kein Sterilprodukt !**
- **Dieses Produkt darf nur von einem Arzt eingesetzt werden, der mit den Indikationen, Gegenanzeigen, Einschränkungen, typischen Befunden und möglichen Nebenwirkungen des Produktes voll vertraut ist.**



Aufbereitung

Es dürfen alle Reinigungsmittel, die in der Gebrauchsanweisung Liquor Drainage Pumpe LiquoGuard®7 REF 00003500 Kapitel „Pflege: Reinigung und Desinfektion“ angegeben sind, verwendet werden. Möller Medical GmbH empfiehlt die Verwendung von Isopropanol 70%. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Kabelenden geschützt sind, um elektrische Störungen an den Steckern zu vermeiden.



Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany



30006554 2020-06 B